



SYPH-Check-1® Självtest

Ref. 26084BI

Självtest som upptäcker antikroppar mot *Treponema pallidum* i blod.

GENERELLT

Syfilis är en sexuell överförbar sjukdom som utvecklas i 3 stadijer. Syjdomen indelas i tre stadijer – primär, sekundär och tertiär syfilis. Inkubationstiden är ca tre veckor till tre månader till primärstadiet, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera år till tertiärstadiet. Vid primär syfilis uppstår ett sår, vanligen på könsorganet, svullna lymfkörtlar i lujmarna kan också förekomma. Sjukdomen orsakas av en spiralformad bakterie vid namn spirochaete *Treponema pallidum* (TP). Infektionen skeer oftast via sexual kontakten men kan också ske via infektion. Diagnos skeer alltid av läkare, vanligtvis genom test som upptäcker specifika antikroppar mot *Treponema pallidum*. SYPH-CHECK-1® är ett specifikt immunologiskt snabbtest som upptäcker *Treponema pallidum* antikroppar med blod som droppas in i testkassetten. Syfilis klassas i Sverige som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittspärning är därför obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills en antibiotikakur är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns.

1. Testhäl
2. Testfönster
3. Pipett
4. Grå hatt
5. Avtryckare
6. Blå kork
7. Vit kork
8. Utspädningsvätska



Innehåll:

- 1 Aluminiumförpackning som innehåller:
- 1 st Testkassett
- 1 st Pipett för bloduppsamling
- 1 st Torkmedel (används ej)
- Öppna förpackningen när du är redo att utföra testet.
- 1 st Steril lanset (+= en extra)
- 1 st 1ml flaska med utspädning
- 1 st Manual

Frågor och svar

Hur fungerar testet?

När *Treponema pallidum* finns i blodet startar immunsystemet produktionen av en specifisk antikropp. Dessa antikroppar detekterar spiroketen *Treponema pallidum* och fastnar på dess. SYPH-CHECK-1® detekterar just dessa specifika antikroppar och på så vis visar på dess närvaro i blodet.

När kan detta test användas?

SYPH-CHECK-1® test bör utföras när det finns misstanke eller symptom. Testet kan utföras när som helst på dygnet.

Kan resultatet vara felaktigt?

Resultatet är korrekt om instruktionerna följs noggrant. Resultatet kan dock vara felaktigt om testet blir vänt innan testet utförs, eller om den mängd blod som läggs i testkassetten inte är korrekt. Pipetten som medföljer säkerställer att blodvolymen blir korrekt.

Har linjernas intensitet i testfönstret någon betydelse?

Styrka, färg eller intensitet i kontrollstrecket har ingen inverkan eller betydelse för att utläsa testresultat. Om du kan urskilja en linje ska detta tolkas som en linje.

Vad betyder linjen under markeringen C?

Det betyder att självtestet fungerar normalt.

Kommer testet att vara tillförlitligt om jag avläser testet efter 15 minuter?

Nej. Testet ska avläsas efter exakt 10 minuter från utspädningsvätskans hällning i testhållet. Resultatet kan dock avläsas upp till 15 minuter.

Syfilis klassas i Sverige som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittspärning är därför obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills en antibiotikakur är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns.

SYPH-Check-1® Kotitesti

Ref. 26084BI

Itsetesti, joka havaitsee *Treponema pallidumin* vasta-aineet verestä.

YLEISESTI

Syfilis (kuppa) on sukupuoliteitse tarttuva sairaus, joka kehittyy kolmessa vaiheessa. Sairaus on jaettu kolmeen vaiheeseen – primaariseen, sekundaariseen ja tertiäärisseen syfiliseen. Itämisaika on noin kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen primäärväilevää aste, seitsemästä kymmenneen viikkoja toissijaisen verheeseen ja useita vuosia tertiäärväilevääseen. Primaarisessa syfilisessä esittyy haavauma, yleensä sukupuolielimissä, nivissä voi myös esittynä imusoluimuiden turvotusta. Taudin aiheuttaa spirochaete *Treponema pallidum* (TP)-niminen spiralin muotoinen bakteeri, joka esittää yleensä seksuaalisen kontaktin kautta, mutta se voi tapahdu myös verensiirron kautta. Diagnosin tekee aina lääkäri, yleensä testeilijä, joka havaitsee *Treponema pallidum* vasta-aineita. SYPH-CHECK-1® on spesifinen immunologinen pikatesti, joka havaitsee *Treponema pallidum* vasta-aineet testikasettiin tiputetulla verellä.

1. Testireikä
2. Tulosikuna
3. Pipett
4. Harmaa kupu
5. Laukaisin
6. Sininen korkki
7. Valkoinen korkki
8. Laimennusneste



Sisältö:

- 1 alumiinipakkaus, joka sisältää:
- 1 kpl Jossa on testikassetti
- 1 kpl Pipetti
- 1 kpl Sekä kuivausainetta (ei käytöön).
- Avaavat pussia vasta, kun olet valmis tekemään testin.
- 1 kpl sterilli lansetti (+ ylimääräinen)
- 1 kpl 1 ml pullo, jossa on laimennusainetta
- 1 kpl käyttööhje

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten testi toimii?

Kun *Treponema pallidum* ilmenee veressä, immuuniirjärestelmä aloittaa tietyt vasta-aineen tuotannon. Nämä vasta-aineet havaitsevat spiroketen *Treponema pallidum* ja kiinnityvät siihen. SYPH-CHECK-1® havaitsee juuri nämä spesifiset vasta-aineet ja osottaa siten niiden esiintymisen veressä.

Milloin testi voi tehdä?

Testi tulee tehdä, kun on epäilyksä tartunnasta tai fyysisiä oireita. Testi voi tehdä mihin aikaan päivästä tahansa.

Voiko tulos olla virheellinen?

Taudin varhainen vaihe voi myös johtaa negativiseen tulokseen, kun *Treponema pallidum* vasta-aineiden pitoisuus on alhainen.

Onko tulosikkunan viivojen vahvuudella merkystä testitulokseen?

Viivojen vähillä tai inserointeillä ei ole vaikuttavaa tarkistukselle. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.

Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalista.

Voiko testitulokseen luotaa, jos tarkistan sen 15 minuutin kuluttua?

Ei. Testi on luettava tasan 10 minuutin jälkeen laimennusnesteen tiputamisesta. Tulos voidaan kuitenkin lukea jo 15 minuutin kuluttua.

Suomessa syfilis luokitellaan tartuntalain mukaan yleisvaaralliseksi sairauudeksi. Siksi tartunnan jäljitys on pakollista. Infektoritutta kehotetaan pidätäytymään yhdynnästä, kunnes antibiotiottihoito on suoritettu ja infektiotapaa kontrollitesti on saatavilla.

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Miten testi toimii?

Kun *Treponema pallidum* ilmenee veressä, immuuniirjärestelmä aloittaa tietyt vasta-aineen tuotannon. Nämä vasta-aineet havaitsevat spiroketen *Treponema pallidum* ja kiinnityvät siihen. SYPH-CHECK-1® havaitsee juuri nämä spesifiset vasta-aineet ja osottaa siten niiden esiintymisen veressä.

Milloin testi voi tehdä?

Testi tulee tehdä, kun on epäilyksä tartunnasta tai fyysisiä oireita. Testi voi tehdä mihin aikaan päivästä tahansa.

Voiko tulos olla virheellinen?

Taudin varhainen vaihe voi myös johtaa negativiseen tulokseen, kun *Treponema pallidum* vasta-aineiden pitoisuus on alhainen.

Onko tulosikkunan viivojen vahvuudella merkystä testitulokseen?

Viivojen vähillä tai inserointeillä ei ole vaikuttavaa tarkistukselle. Jos voit erottaa viivan, se tulkitaan viivaksi.

Mitä C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa?

C-merkinnän alla oleva viiva tarkoittaa, että testi toimii normaalista.

Voiko testitulokseen luotaa, jos tarkistan sen 15 minuutin kuluttua?

Ei. Testi on luettava tasan 10 minuutin jälkeen laimennusnesteen tiputamisesta. Tulos voidaan kuitenkin lukea jo 15 minuutin kuluttua.

Suomessa syfilis luokitellaan tartuntalain mukaan yleisvaaralliseksi sairauudeksi. Siksi tartunnan jäljitys on pakollista. Infektoritutta kehotetaan pidätäytymään yhdynnästä, kunnes antibiotiottihoito on suoritettu ja infektiotapaa kontrollitesti on saatavilla.

SYPH-Check-1® Självtest

Ref. 26084BI

Självtest som upptäcker antikroppar mot *Treponema pallidum* i blod.

GENERELLT

Syfilis är en sexuell överförbar sjukdom som utvecklas i 3 stadier. Sjukdomen indelas i tre stadijer – primär, sekundär och tertiär syfilis. Inkubationstiden är ca tre veckor till tre månader till primärstadiet, sju till tio veckor till sekundärstadiet och flera år till tertiärstadiet. Vid primär syfilis uppstår ett sår, vanligen på könsorganet, svullna lymfkörtlar i lujmarna kan också förekomma. Sjukdomen orsakas av en spiralformad bakterie vid namn spirochaete *Treponema pallidum* (TP). Infektionen skeer oftast via sexual kontakten men kan också ske via infektion. Diagnos skeer alltid av läkare, vanligtvis genom test som upptäcker specifika antikroppar mot *Treponema pallidum*. SYPH-CHECK-1® är ett specifikt immunologiskt snabbtest som upptäcker *Treponema pallidum* antikroppar med blod som droppas in i testkassett. Syfilis klassas i Sverige som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Smittspärning är därför obligatorisk. Den smittade uppmanas att avstå från samlag tills en antibiotikakur är genomförd och ett smittfritt kontrollprov finns.

1. Testhäl
2. Testfönster
3. Pipett
4. Grå hatt
5. Avtryckare
6. Blå kork
7. Vit kork
8. Utspädningsvätska




Innehåll:

- 1 Aluminiumförpackning som innehåller:
- 1 st Testkassett
- 1 st Pipett för bloduppsamling
- 1 st Torkmedel (används ej)
- Öppna förpackningen när du är redo att utföra testet.
- 1 st Steril lanset (+ en extra)
- 1 st 1ml flaska med utspädning
- 1 st Manual

Varningsföreskrifter och viktig information

Observera - Läs instruktionerna noggrant före användning.

Detta är ett in-vitro självtest, endast för exterrnt bruk. Får ej förtäras. Läs instruktionerna noggrant före användning. Resultatet kan endast utläsas när instruktionerna följs enligt direktiv. Följ samtliga instruktioner gällande handhavande, blodmängd och utspädning. Förvaras mellan +4°C till +30°C. Förvaras torrt och skyddas mot solljus. Ska ej användas efter båt före datum som anges på aluminiumförpackningen. Testet ska inte användas om aluminiumförpackningen är öppnad. Självtesten ska inte återanvändas. Förvara den produkt utom räckhåll för barn och djur. Ytterförpackning sorteras som kartong/wellpapp. Övrigt ska sorteras som restavfall.

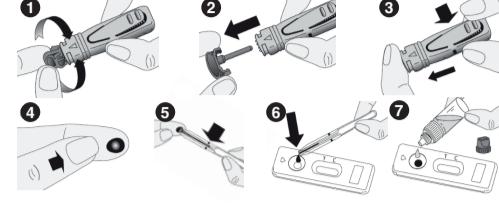

GÖR SÅ HÄR:

1. Tvätta händerna med tvål och vatten. Skölj och torka händerna nog.

2. Förbered för att genomföra testet: Ta ut testkassetten och pipetten ur aluminiumpåsen och placera testkassetten plant inom räckhåll. (Torkmedlet används ej).

3. Förbered lansetten. Detta görs genom att *yrida om den grå delen* (bild 1) på *lansetten 2-3 varier* till den lossnar *HELT* och sedan dra den grå delen rakt ut (bild 2), utan att trycka på avtryckaren.

4. Massera den valda fingertoppen med dina rengjorda fingrar.

5. Tryck lansetten **BESTÄMT** mot fingret och tryck på avtryckaren. (Nälen kommer automatiskt att dras in i lansetten).

6. Pressa **HÄRT** på fingret för att få ut en dropp blod.

7. Pipetten placeras mot blodsdroppen, ett undertryck gör att blodet sugs upp. Låt endast den mängd blod som krävs flöda till markeringen (streck) av pipetten. Om mer blod behövs, massera fingret igen. Försök undvika att få in luftbubblor i pipetten. Notera att detta moment kan ta upp till 2 minuter att genomföra. Tryck inte på pipetten, blodet sugs in av kapillärkraft.

8. Pressa ut blodet från pipetten i testhålet (det runda hålet) genom att trycka på pipetten.

9. Om du inte lyckas med att låta blodet flöda in i pipetten – Lägg bort pipetten, fortsätt att massera fingret hårt tills en dropp har formas - om möjligt; Låt droppen falla ifrån i testhålet. Om droppen inte väl lämnar fingret; Låt droppen vidröra i testhålet och flyta ut.

10. Vänta ca 30 sekunder för att låta blodet absorberas i testhålet. Skruva av det blå locket på utspädningsvätskan. Droppa sedan 4 droppar i testhålet med 2 sekunder mellan varje dropp.



SYPH-Check-1® Selvtest

Ref. 26084BI
Selvtest som oppdager antistoffer mot *Treponema pallidum* i blod.

GENERELT


Syfilis er en seksuelt overførbar sykdom som utvikler seg i 3 stadier. Sykdommen er delt inn i tre stadier – primær, sekundær og tertiar syfilis. Inkubasjonsperioden er omkring tre uker til tre måneder til den primære fasen, syl til ti uker til den sekundære fasen og flere år til den tertiare fasen. Ved primær syfilis oppstår et sår, vanligvis på kjønsorganene, hvorne lymfeknuter i lysken kan også oppstå. Sykdommen er forårsaket av en spiralformet bakterie kalt spirochaete *Treponema pallidum* (TP). Infeksjonen oppstår vanligvis ved seksuell kontakt, men kan også oppstå ved transfusjon. Diagnose stilles alltid av lege, vanligvis gjennom tester som påviser spesifikke antistoffer mot *Treponema pallidum*.

SYPH-CHECK-1® er en spesifikk immunologisk hurtigtest som oppdager *Treponema pallidum*-antistoffer med blod som slippes ned i en testkassett.

- 1. Testhull
- 2. Resultatindu
- 3. Pipette
- 4. Grå hatt
- 5. Utlosr
- 6. Blå kork
- 7. Hvit kork
- 8. Fortynningsmiddel

Innhold:

- 1 stk aluminiumspose som inneholder:
- 1 stk Testkassett
- 1 stk Pipette for blodoppsamling
- 1 stk Tørkemiddel (brukes ej)
- Åpne forpakningen når du er klar til å fullføre testen.
- 1 stk Steril lancett (+ en ekstra)
- 1 stk 1ml flaske med fortynning
- 1 stk Manual

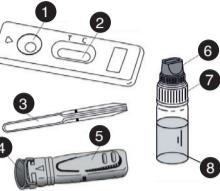

MANUAL SELVTEST SYPH-Check-1® Selvtest

NO

quicktest.no

Les av resultatet

Styrke, farge eller intensitet i testvinduet har ingen effekt eller betydning for å kunne avlese testresultater. T og C er forkortelser for T (Test) og C (Control).

1. Negativt resultat

Bare én farget linje vises under C (Kontroll). Dette resultatet betyr at testen ikke påviste *Treponema pallidum* i blodet. Ved mistanke eller symptomer på syfilis bes du kontakte lege.



2. Positivt resultat

To farge linjer vises under T (Test) og C (Kontroll). Fargestrykene kan være den samme som C eller svakere. Dette resultatet betyr at testen har påvist *Treponema pallidum* i blodet. Du anbefales å kontakte lege umiddelbart og avstå fra samleie.



3. Misslykkat resultat

Dersom ingen linje vises, eller hvis bare en linje under T vises, har testen feilet og bør kasseres. Merk at selv-testen er forbuket og ikke kan gjenbrukes. Det anbefales at du anseres i en ny test utføres.



Syfilis er i Sverige klassifisert som en allmennfarlig sykdom i henhold til smittevernloven. Smittesporing er derfor obligatorisk. Den smittede bes om å avstå fra samleie inntil en antibiotikakur er gjennomført og en infeksjonsfri kontrolltest er tatt.

quicktest..



SYPH-Check-1® Selvtest

Ref. 26084BI
Selvtest, der påviser antistoffer mod *Treponema pallidum* i blodet.

GENERELT


Syfilis er en seksuelt overførbar sygdom, der udvikler sig i 3 faser. Sygdommen er opdelt i tre stadier - primær, sekundær og tertiar syfilis. Inkubationsperioden er omkring tre uger til tre måneder til den primære fase, syl til ti uger til den sekundære fase og flere år til den tertiarer fase. Ved primær syfilis opstår et sår, normalt på konsorganerne, hvænde lymfeknuder i lysken kan også forekomme. Sygdommen er forårsaget af en spiralbakterie kaldet spirochaete *Treponema pallidum* (TP). Infektionen opstår normalt ved seksuel kontakt, men kan også opstå ved transfusion. Diagnosen stilles altid af lege, normalt gennem tests, der påviser specifikke antistoffer mod *Treponema pallidum*.

SYPH-CHECK-1® er en spesifikk immunologisk hurtigtest, der påviser *Treponema pallidum*-antistoffer med blod, der falder ned i en testkassett.

- 1. Testhul
- 2. Prøvesvar
- 3. Pipette
- 4. Grå hætte
- 5. Udløser
- 6. Blå hætte
- 7. Hvid hætte
- 8. Fortynningsmiddel

Innhold:

- 1 stk aluminiumspose, som indeholder:
- 1 stk testkassett
- 1 stk pipette for blodopsamling
- 1 stk Tørningsmiddel (anvendes ikke)
- Åbn pakken, når du er klar til at udøre testen.
- 1 steril lancet (+ en ekstra)
- 1 1ml flaske med fortynning
- 1 manual

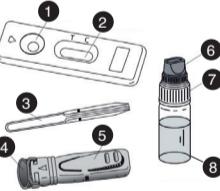

MANUAL SELVTEST SYPH-Check-1® Selvtest

DK

quicktest.dk

Aflæs resultatet

Styrke, farve eller intensitet i testvinduet har ingen påvirkning eller betydning for aflæsning af testresultatet. T og C er forkortelser for T (Test) og C (Kontrol).

1. Negativt resultat

Kun én farvet linje vises under C (Kontrol). Dette resultatet betyder, at testen ikke påviste *Treponema pallidum* i blodet. Spør din læge, hvis du har mistanke om eller har symptomer på syfilis.



2. Positivt resultat

To farvede linjer vises under T (Test) og C (Kontrol). Farvestrykene kan være den samme som C eller svakere. Dette resultatet betyder, at testen har påvist *Treponema pallidum* i blodet. Det anbefales, at du straks kontakter en læge og undlader at have sex.



3. Mislykket resultat

Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun vises en enkelt linje under T, er testen forfejet og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan gjenbruges. Det anbefales, at der udføres en ny test.



Syfilis er i Danmark klassificeret som en alment farlig sygdom ifølge smittebeskyttelsesloven. Smittesporing er derfor obligatorisk. Den smittede bliver bedt om at afstå fra samleje, inntil en antibiotikakur er afsluttet og en infektionsfri kontrolltest er taget.

Spørsmål og svar

Hvordan virker testen?

Når *Treponema pallidum* er til stede i blodet, starter immunsystemsproduksjonen av et spesifikt antistof. Disse antistoffene oppdager og binder seg til spiroketten *Treponema pallidum*. SYPH-CHECK-1® oppdager nøyaktig disse spesifikke antistoffene og indikerer dermed deres tilstedeværelse i blodet.

Hvornår kan denne test bruges?

Testen skal udføres, når der er mistanke om, eller har fysiske symptomer på syfilis. Testen kan udføres på ethvert tidspunkt af dagen.

Kan resultatet blive forkert?

Hvis koncentrationen af *Treponema pallidum*-antistoffer er lavt i det tidlige stadiet af sygdommen, kan det lede til et negativt resultat (Falsk negativ).

Har linjenes intensitet i testvinduet nogen betydning?

Kontrolstregens styrke, farve eller intensitet har ingen effekt eller betydning for aflæsning af testresultaterne. Hvis du kan skelne en linje, bør dette tolkes som en linje.

Hvad betyder linjen under markeringen C (Control)?

Den betyder, at selvtesten fungerer normalt.

Vil testen være pålitelig, hvis jeg aflæser testen efter 15 minutter?

Nej. Testen skal aflæses nøyaktig 10 minutter efter, at fortynningsmidlet er frigivet, men resultatet kan aflæses op til 15 minutter.

Hvis der ikke fremkommer en linje, eller hvis der kun vises en enkelt linje under T, er testen forfejet og bør kasseres. Bemærk, at selvtesten er opbrugt og ikke kan gjenbruges. Det anbefales, at der udføres en ny test.



Syfilis er i Danmark klassificeret som en alment farlig sygdom ifølge smittebeskyttelsesloven. Smittesporing er derfor obligatorisk. Den smittede bliver bedt om at afstå fra samleje, inntil en antibiotikakur er afsluttet og en infektionsfri kontrolltest er taget.

Spørsmål og svar

Hvad gør jeg, hvis testen er positiv?

Hvis resultatet er positiv, betyr det, at der er antistoffer fra *Treponema pallidum* i dit blod, du bliver derfor bedt om at kontakte en læge og afstå fra samleje. En læge vil tage stilling til yderligere undersøgelser og eventuel behandling. Bemærk, at infektionsporing er obligatorisk.

Hvad gør jeg, hvis testen er negativ?

Hvis resultatet er negativt, betyr det, at testen ikke påviste *Treponema pallidum*-antistoffer i blodet. Søg altid læge ved symptomer. Bemærk, at infektionsporing er obligatorisk.

Hvor pålitelig er testen?


SYPH-CHECK-1® er pålitelig, og en teknologi der har været brugt af sundhedsrådet i ca. 15 år. Evalueringssrapporter viser en pålitelighed på 97,6 % sammenlignet med referencemetoder. Selvom testen er pålitelig, kan der forekomme falsk positive eller falsk negative testresultater.

Advarselsforskrifter og viktig informasjon

Merk - Læs instruksjonene nøyde før bruk.

Dette er en in-vitro selvtest, kun for ekstern bruk. Skal ikke konsumeres. Les instruksjonene nøyde før bruk. Resultatet kan bare leses av når instruksjonene følges nøyaktig. Følg alle instruksjonene for håndtering, blodmængde og fortynning. Oppbevares mellom +4°C til +30°C. Må ikke fryses. Oppbevares tort og beskyttet mot sollys. Skal ikke brukes etter utløpsdatoen mærket med et timerglas på ytterpakningen og aluminiumspakningen. Testen skal ikke brukes dersom aluminiumspakningen er åpenet. Selvtesten skal ikke gjenbrukes.

Oppbevar produktet utilgængeligt for barn og dyr. Ytteremballasje sorteres som kartong/papir. Øvrige affald skal sorteres som restaffald.

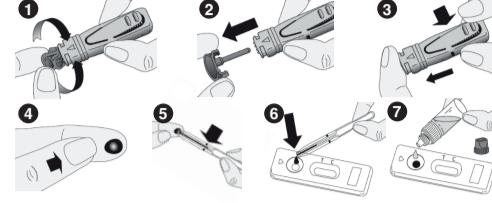

SLIK GJØR DU:

1. Vask hendene grundig med såpe og vann. Tørk hendene.
2. Forbered for å gjennomfore testen: Fjern testkassetten og pipetten ut av aluminiumsposen og plasser testkassetten flatt innenfor rækkevidde. (Tørkemidlet skal ikke brukes).
3. Klarer lancetten. Dette gjøres ved å vri den grå delen (bilde 1) av lancetten 2-3 omgange, intil den løsner HELT, og derefter trekke den grå delen rett ut (bilde 2), uten å trykke på utløserknappen.
4. Masser valgt fingertopp med de rengjorte fingrene.
5. Tryk lancetten BESTEMT mot fingeren og tryk på utløserknappen. (Nålen trækkes automatisk inn i lancetten).

Spørsmål og svar

Hva gjør jeg hvis testen er positiv?

Hvis resultatet er positivt, betyr det at *Treponema pallidum*-antistoffer er tilstede i blodet ditt, du blir bedt om å kontakte lege og avstå fra samleie. En læge vil ta stilling til videre utredning og eventuell behandling. Merk at infektionsporing er obligatorisk.

Hva gjør jeg hvis testen er negativ?

Hvis resultatet er negativt, betyr det at testen ikke påviste *Treponema pallidum*-antistoffer i blodet. Ved symptomer, kontakt alltid lege. Merk at infektionsporing er obligatorisk.

Hvor pålitelig er testen?

SYPH-CHECK-1® er pålitelig, og teknologien har vært brugt i ca. 15 år. Evalueringssrapporter viser en pålitelighed på 97,6 % sammenlignet med referencemetoder. Selvom testen er pålitelig, kan der forekomme falsk positive eller falsk negative testresultater.



| | | | |
|-------------------------------|-----|-------------------------------------|--------------------|
| Læs bruksanvisningen før bruk | IVD | För in vitro diagnostisk bruk | Må ikke gjenbrukes |
| Lagres mellom +4°C og +30°C | LOT | Batchnummer | Udlesdato |
| Producent | | MD- 080020 m5 c - Revideret 2022/01 | |

Advarselsforskrifter og viktig informasjon

Bemerk - Læs instruksjonene nøyde før bruk.

Dette er en in-vitro selvtest, kun til udvortes brug. Må ikke indtages. Læs instruktionerne nøyde før anvendelse. Resultatet kan kun afleses, når instruksjonerne følges nøjagtigt